



## Anwendung

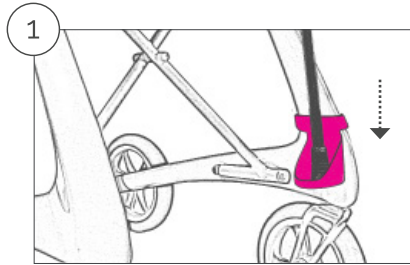

1. Stellen Sie das untere Ende Ihres Stockes in den unteren Teil des Stockhalters.
2. Drücken Sie den Stock vorsichtig in den Clip, bis er sicher eingerastet ist.

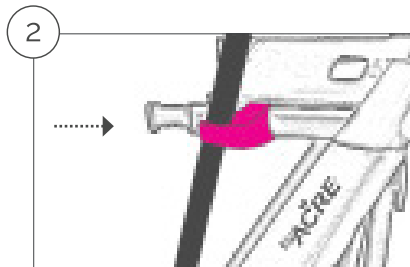

Um den Stock zu entnehmen, drücken Sie ihn einfach nach vorne, bis er sich aus dem Clip löst. Nun können Sie Ihren Stock entnehmen.

## Technische Daten

Material: PETG

Höhe: 10 cm

Breite: 6 cm


Durchmesser: 5,5 cm

## Pflege

Um den Stock zu entnehmen, drücken Sie ihn einfach nach vorne, bis er sich aus dem Clip löst. Nun können Sie Ihren Stock entnehmen.

# Stockhalter

ZUR BEFESTIGUNG IHRES STOCKES  
CARBON ULTRALIGHT ZUBEHÖR

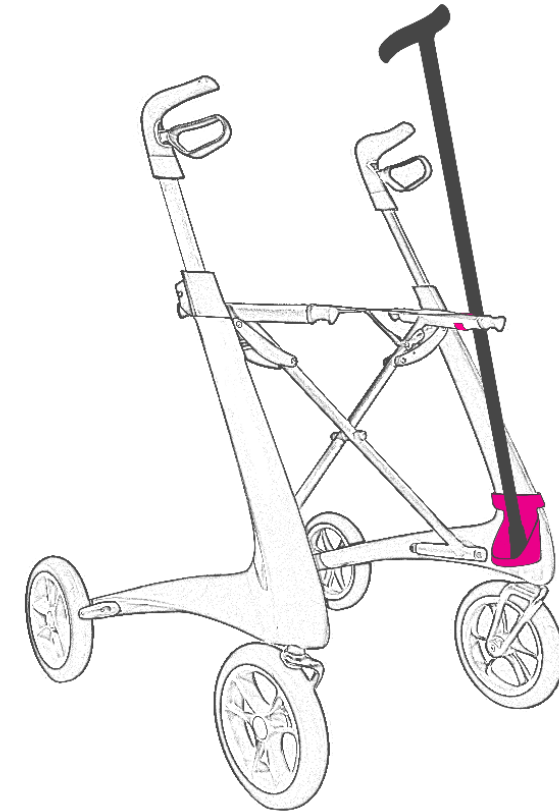

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Stockhalter! Damit Sie Ihren Stock befestigen können, während Sie Ihren Carbon Ultralight-Rollator benutzen, haben wir diesen intelligenten und benutzerfreundlichen Stockhalter entwickelt.

by **ACRE**

Entworfen in Dänemark. Handgearbeitet in China.  
byACRE ApS, I.C. Modewegsvej 1, 2800 Lyngby

GERMAN


by **ACRE**

# Anwendung des Stockhalters


Der Stockhalter ist einfach zu befestigen und hat am Boden eine Öffnung, damit sich weder Wasser noch Dreck ansammeln können.

Die Bilder in dieser Anleitung beziehen sich auf den Stockhalter für die rechte Rahmenseite. Wenn Sie einen Halter für die linke Rahmenseite haben, befolgen Sie die Schritte auf der linken Seite des Rollators.


## Montage

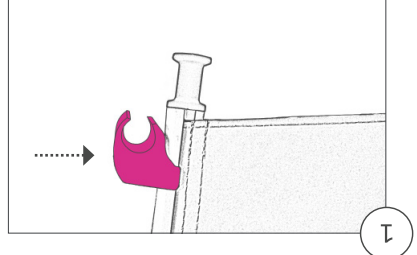

1. Befestigen Sie den kleinen Clip seitlich am Sitz auf der Seite, wo Ihr Stockhalter angebracht werden soll.

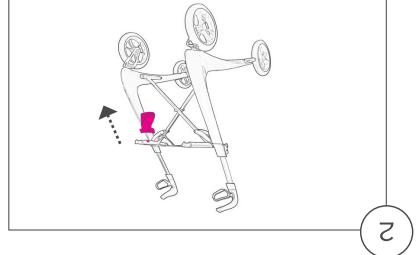


2. Stecken Sie den anderen Teil des Stockhalters von innen auf den schmalen Bereich des Seitenrahmens und führen ihn abwärts..

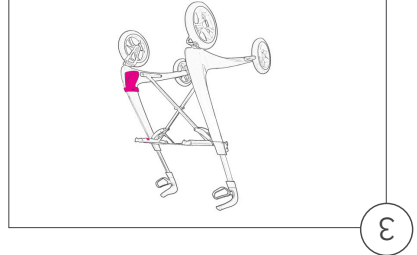


3. bis er sicher an der breitesten Stelle des Seitenrahmens sitzt.


## Demontage

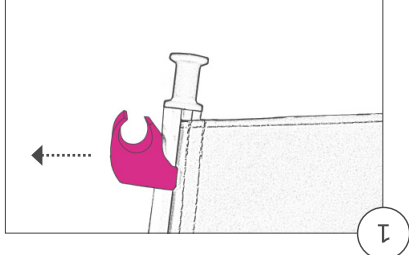

1. Lösen Sie den Clip vorsichtig von der Seitenschiene des Sitzes.

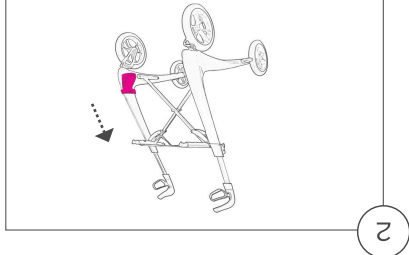

2. Ziehen Sie den unteren Teil des Stockhalters vorsichtig entlang des Rahmens nach oben..

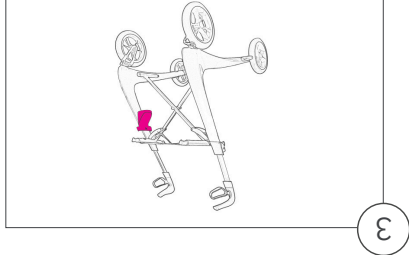

3. bis Sie ihn abnehmen können.